

exocad Library

Library 設置方法

① 下記よりダウンロードしたいライブラリーの QR コードを読み込む、またはクリックしダウンロードする

Geo Library - R8_2



Analog Library - R4



BS Library - R1



BS GMS Library - R1




*ライブラリーはダウンロード後に Zip ファイルを展開する

③ 解凍したフォルダーを開き、中のフォルダーを指定の場所に貼り付ける


- ・インプラントライブラリ、BS ライブラリ

(C:/exocad-DentalCAD_v3.0-2020-12-23_Geo/DentalCADApp/library/implant)

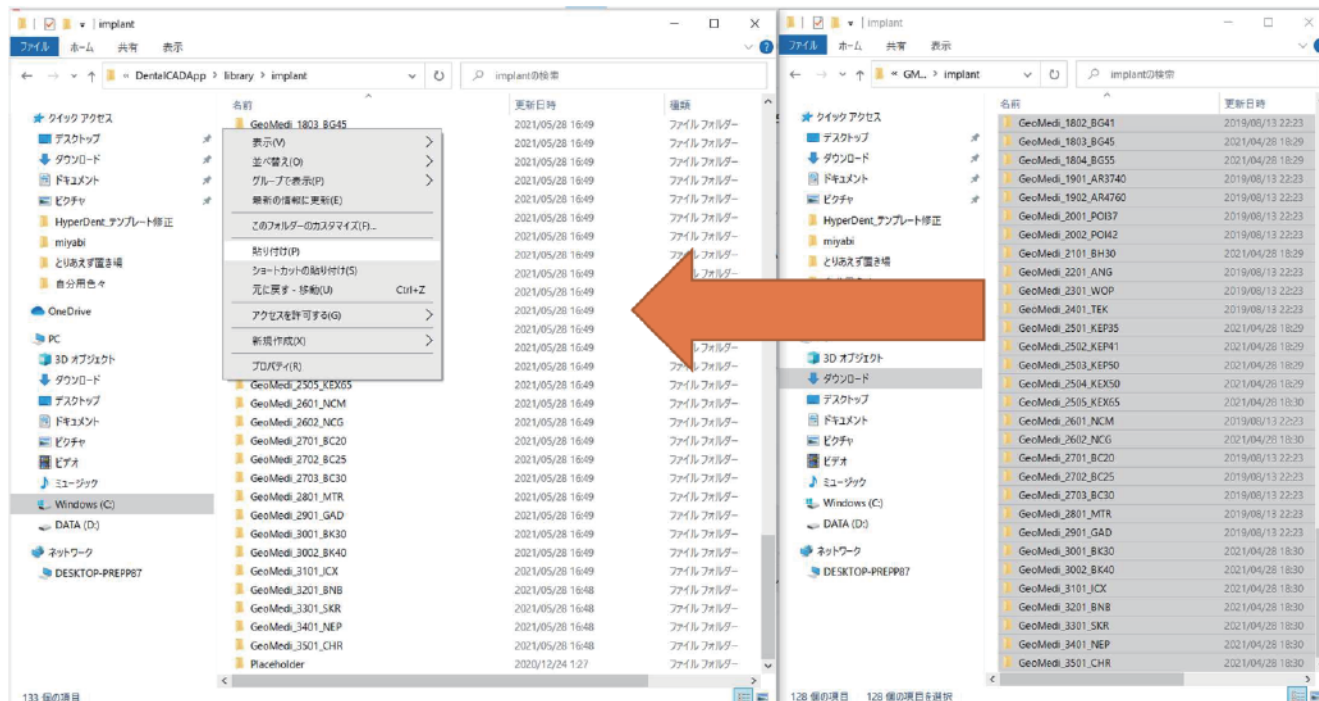


- ・モデルクリエイターライブラリ (アナログライブラリ)

(C:/exocad-DentalCAD_v3.0-2020-12-23_Geo/DentalCADApp/library/modelcreator/implants)

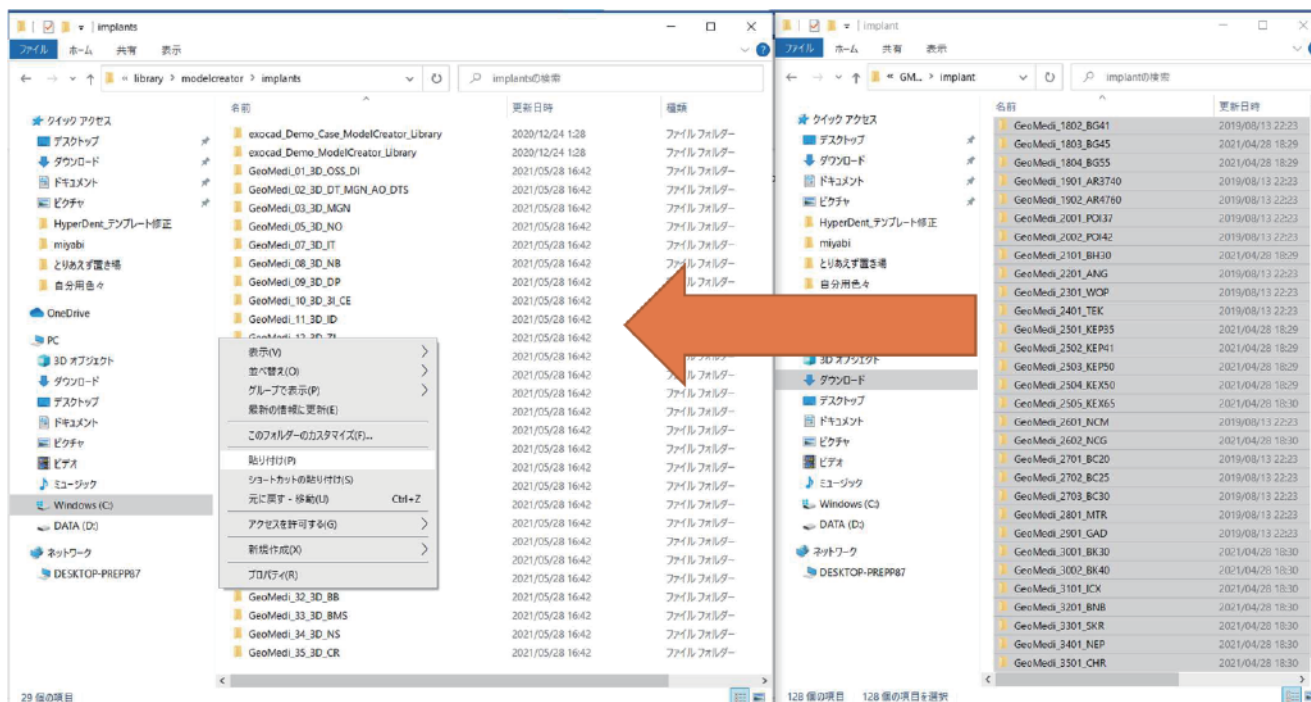

④ 開いている exocad を全て閉じ、再度立ち上げる
ライブラリーが適応されているか確認する

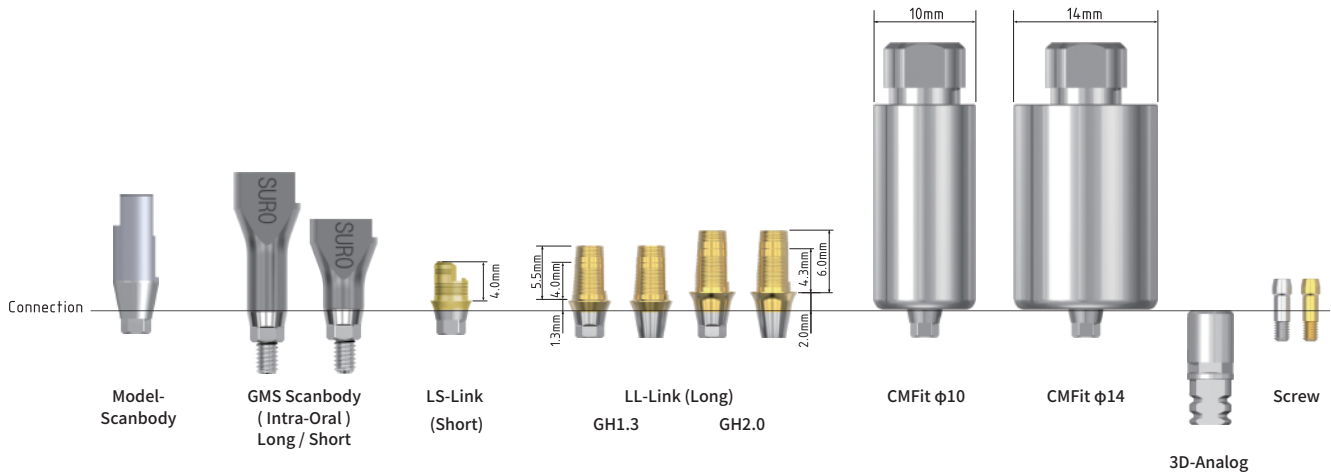

Geo product code for different type

Cement gap option with correspond Scanbody

Library for Implant System

Geo_0101 SUM
Geo_0102 SURO
Geo_0103 EXM
Geo_0104 EXR
...

LS (Short) Link
LL C13 H40
LL C13 H55
LL C20 H43
LL C20 H60
CMFIT
Premill, blank
LL (Long) Link

027 SC Cement (gap)_Zirconia
035 SC Model Scanbody
042 SC
052 SC
027 GMS_S GMS Scanbody (Intra-oral Scanbody)
035 GMS_S
045 GMS_S S / L = Hight
052 GMS_S S : 7.0 ~ 8.0mm
027 GMS_L L : 10.5 ~ 11.5mm
035 GMS_L
042 GMS_L
052 GMS_L
08 PMMA_SC Model Scanbody
10 PMMA_SC
08 PMMA_GMS_S Intra-oral Scanbody
10 PMMA_GMS_S
08 PMMA_GMS-L
10 PMMA_GMS-L
Cement (gap)_PMMA,Metal

