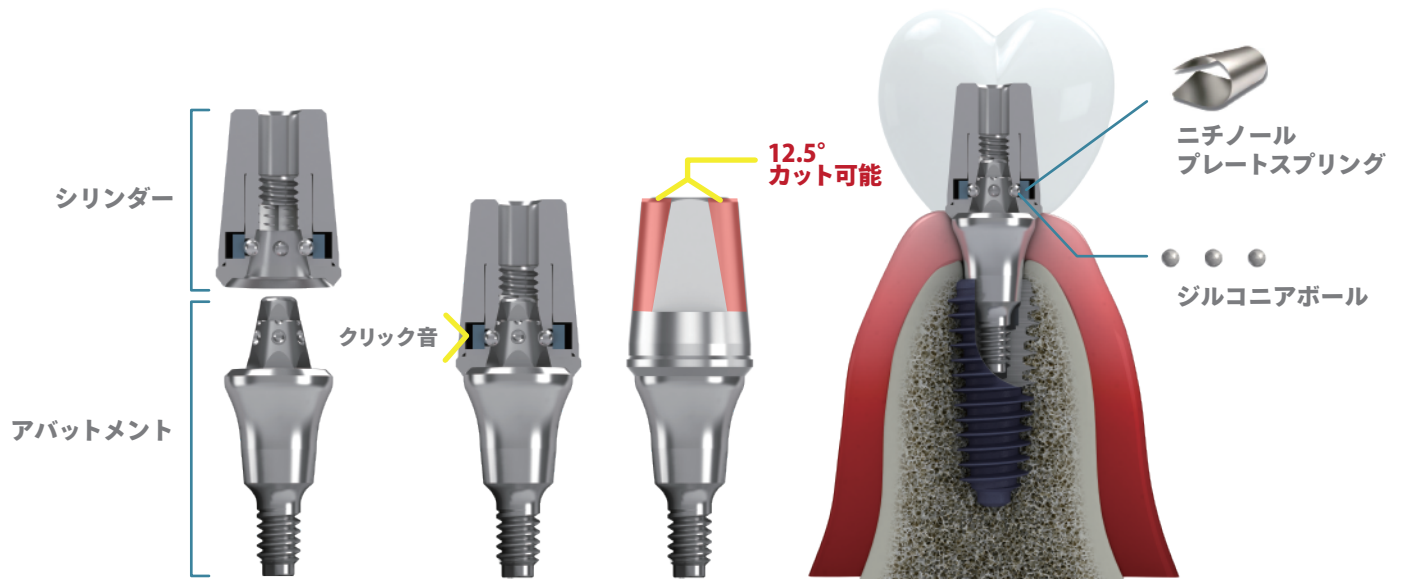


EZ CROWN



EZ LOCKING 方式によるスクリューレスのクラウンに特化したシリンダーと対合するアバットメントシステム

シリンダー内にスプリングとジルコニアボールを組み込み、歯科医師が着脱可能な構造をしているため
インプラント補綴にスクリューホールが必要がなく、従来法より高い審美性を誇る
取り外しが可能で、清掃も容易であり、インプラント周囲炎の予防も期待できる

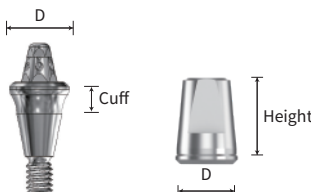
締結時、シリンダーのジルコニアボールがアバットメントの溝に「カチッ」と音を立てて装着

適用可能インプラントシステム

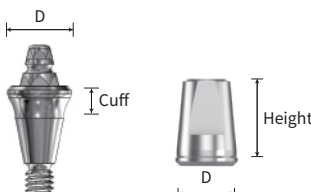
- Osstem/ HIOSSEN TS II,III 4.0 / 4.5 / 5.0
- MegaGen Anyone 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0
- Dentium Implantium / Superline
- DIO UF II 3.8 / 4.0 / 4.5 / 5.0
- Neo Biotech IS II active 3.5 / 4.0 / 4.5

EZ CROWN

S type - Single

Abutment	Cylinder	Diameter	Height (mm)	Cuff (mm)	Code No.
		Abutment Ø4.5	3.8	1.0	SS521038SR / SS521050SR / SS521065SR
			5.0	2.0	SS522038SR / SS522050SR / SS522065SR
			6.5	3.0	SS523038SR / SS523050SR / SS523065SR
		Cylinder Ø5.2	6.5	4.0	SS524038SR / SS524050SR / SS524065SR
				5.0	SS525038SR / SS525050SR / SS525065SR
				6.0	SS526038SR / SS526050SR / SS526065SR

H type - Bridge

Abutment	Cylinder	Diameter	Height (mm)	Cuff (mm)	Code No.
		Abutment Ø4.5	3.8	1.0	S521038SR / S521050SR / S521065SR
			5.0	2.0	S522038SR / S522050SR / S522065SR
			6.5	3.0	S523038SR / S523050SR / S523065SR
		Cylinder Ø5.2	6.5	4.0	S524038SR / S524050SR / S524065SR
				5.0	S525038SR / S525050SR / S525065SR
				6.0	S526038SR / S526050SR / S526065SR

Components



**EZ CROWN
Abutment**

原材料: チタン合金 (Ti-6Al-4V ELI、ASTM F 136)



**EZ CROWN
Cylinder**

原材料 ボディ: チタン合金 (Ti-6Al-4V ELI、ASTM F 136)

原材料 中: ジルコニアボール / Ni-Ti 形状記憶合金のスプリング



**Cylinder
Remover Driver**

シリンダーとアバットメントを分離する

原材料: ステンレス鋼



Abutment Driver

アバットメントをフィクスチャーと締結する

原材料: ステンレス鋼



Cylinder Driver

シリンダーをアバットメントに装着する

原材料: ステンレス鋼



Cap

別売り 原材料: POM